


MA RESSOURCE SURECLICK^{MD}

UN GUIDE POUR SOUTENIR VOTRE
PARCOURS AVEC REPATHA^{MD}

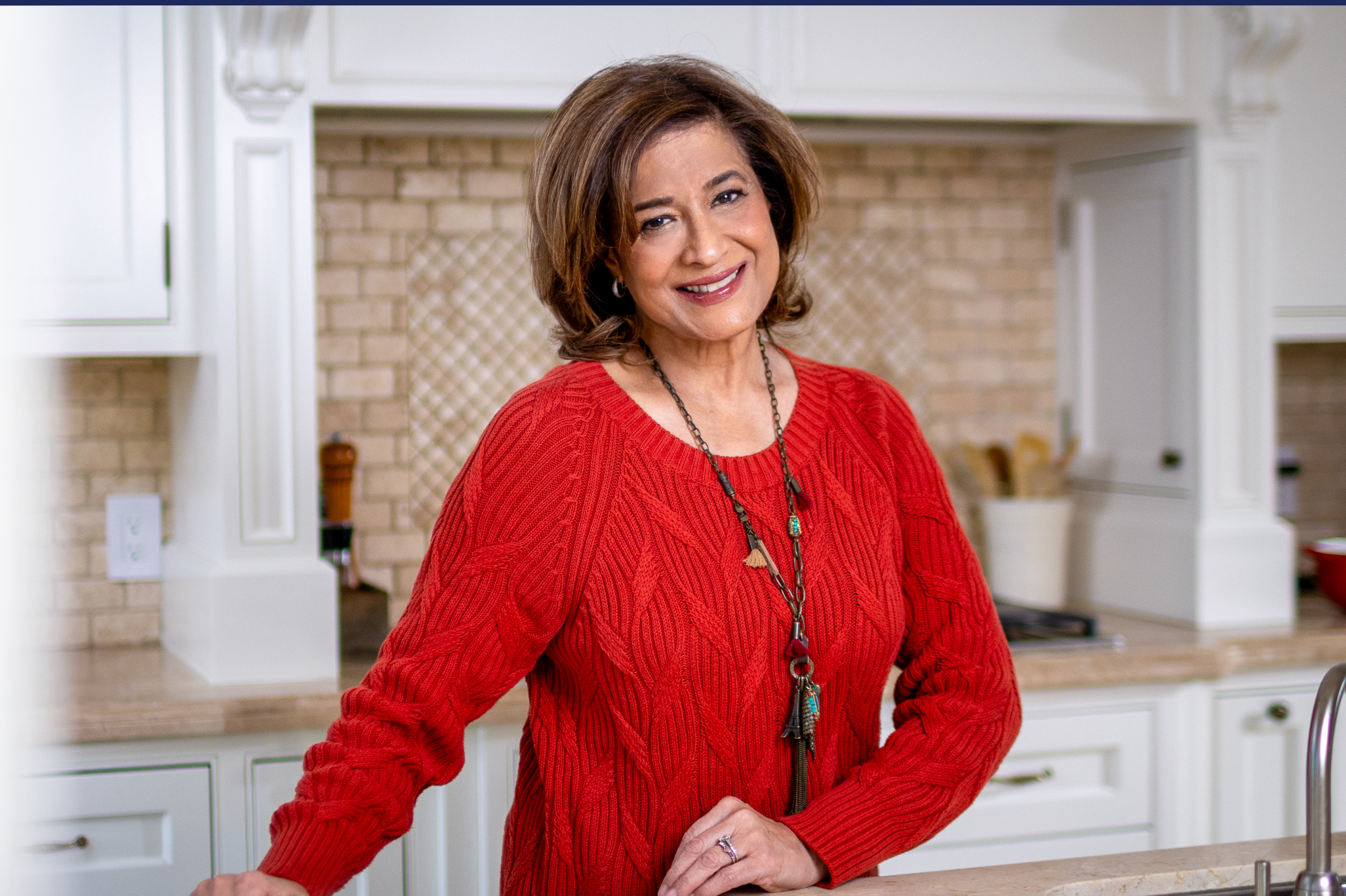

VOTRE PARTENAIRE EN SOINS, À CHAQUE ÉTAPE

Cette ressource vise à vous fournir un aperçu et des renseignements de base sur l'auto-injecteur SureClick, mais elle ne remplace pas les renseignements contenus dans le feuillet de **renseignements sur les médicaments à l'intention des patients**. Veuillez consulter le mode d'emploi fourni avec votre ordonnance de Repatha^{MD} avant d'effectuer votre injection.

Il est important de ne pas essayer de vous administrer l'injection vous-même, à moins d'avoir reçu une formation de votre professionnel de la santé. Si vous avez d'autres questions, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé.

 **Repatha**^{MD}
évolocumab injection

REPÈRE **Repatha**^{MD}
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PATIENTS

COMMENCER À UTILISER VOTRE AUTO-INJECTEUR SURECLICK

Cette ressource vise à vous fournir un aperçu et des renseignements de base sur l'auto-injecteur SureClick, mais elle ne remplace pas les renseignements contenus dans le feuillet de **renseignements sur les médicaments à l'intention des patients** fourni avec votre ordonnance de Repatha^{MD}.

Veillez consulter le mode d'emploi fourni avec votre ordonnance de Repatha^{MD} avant d'effectuer votre injection. Si vous avez d'autres questions, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé.



Vous pourrez trouver dans cette ressource des réponses à vos questions concernant l'utilisation de l'auto-injecteur SureClick.



Voir la page 18 pour savoir comment accéder à la vidéo de démonstration de l'injection SureClick!

BESOIN D'AIDE?



Vous pouvez joindre le Programme de soutien aux patients REPÈRE Repatha^{MD} au **1 888 Repatha (1 888 737-2842)**, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, HNE.



**Consultez le site
Repatha.ca**

**GETTING
STARTED**

INJECT

RESOURCES

FAQ

**TRAVEL
GUIDANCE**

**IMPORTANT
SAFETY INFORMATION**

COMMENCER À UTILISER VOTRE AUTO-INJECTEUR SURECLICK À LA MAISON

En vous préparant à utiliser l'auto-injecteur SureClick pour la toute première fois, vous vous demanderez peut-être si vous vous y prenez bien.

Vous pourriez avoir des questions ou des doutes au sujet du processus. D'autres patients éprouvent la même chose. Vous n'êtes pas seul.

Il y a beaucoup à apprendre et vous voulez faire les choses correctement. Nous sommes là pour vous soutenir!

Votre injection de Repatha^{MD} peut désormais être intégrée à votre routine habituelle : une injection, toutes les deux semaines.



Grâce à cette ressource et aux outils en ligne, **vous pouvez y arriver.**

Commençons maintenant!

Examinez attentivement la **ressource My SureClick^{MD}**, qui offre des renseignements supplémentaires utiles pour vous et votre aidant, notamment :

- 1.** Principales étapes de l'injection
- 2.** Conseils utiles
- 3.** Ressources et outils
- 4.** Réponses aux questions fréquemment posées

[Veuillez consulter les renseignements importants sur l'innocuité à la page 23. Consultez également le feuillet de renseignements complets sur les médicaments à l'intention des patients, qui est fourni avec votre médicament.](#)

GETTING
STARTED

INJECT

RESOURCES

FAQ

TRAVEL
GUIDANCE

IMPORTANT
SAFETY INFORMATION

TROUVER UN ENDROIT TRANQUILLE ET CALME OÙ EFFECTUER L'INJECTION

Commencez du bon pied et prenez votre temps

Trouvez un endroit tranquille et calme dans votre maison, où les animaux de compagnie ou d'autres personnes ne peuvent vous distraire ou vous interrompre.

Choisissez une pièce dont vous pouvez fermer la porte. Asseyez-vous sur une chaise confortable afin d'être plus détendu.



BESOIN D'AIDE?



Vous pouvez joindre le Programme de soutien aux patients REPÈREpatha^{MD} au **1 888 Repatha (1 888 737-2842)**, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, HNE.




Consultez le site
Repatha.ca

INJECTER

Dans cette section, nous aborderons les étapes à suivre pour injecter le médicament.

Veillez lire les instructions étape par étape dans le feuillet de renseignements sur les médicaments à l'intention des patients avant de commencer l'injection.

[Veillez consulter les renseignements importants sur l'innocuité à la page 23. Consultez également le feuillet de renseignements complets sur les médicaments à l'intention des patients, qui est fourni avec votre médicament.](#)

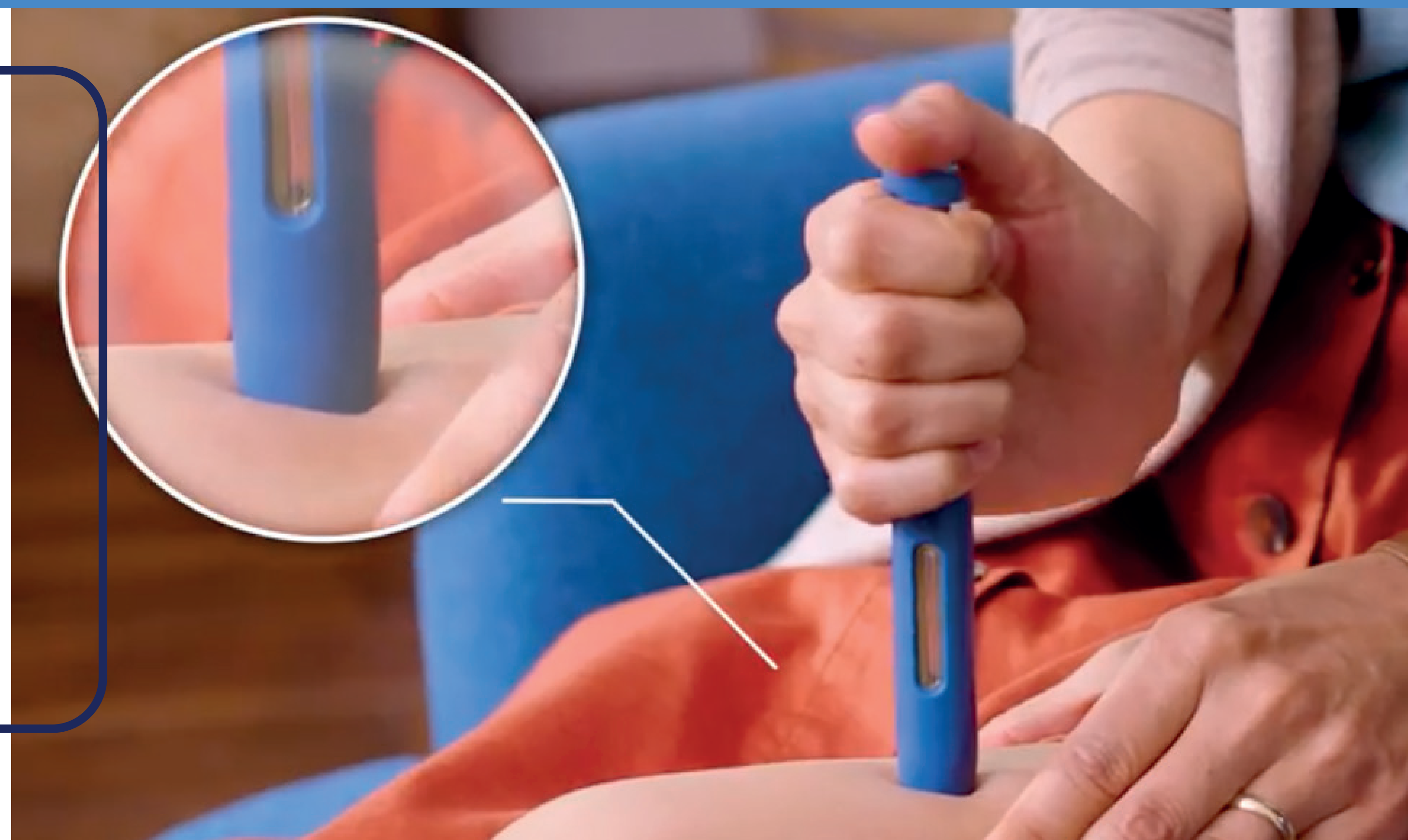

GETTING
STARTED

INJECT

RESOURCES

FAQ

TRAVEL
GUIDANCE

IMPORTANT
SAFETY INFORMATION

APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE AUTO-INJECTEUR SURECLICK

Introduction : Renseignements importants à connaître à propos de votre auto-injecteur SureClick

- L'auto-injecteur SureClick est un auto-injecteur prérempli de votre médicament et prêt à l'emploi.
- Veuillez lire les instructions étape par étape dans le feuillet de **renseignements sur les médicaments à l'intention des patients** pour obtenir des renseignements détaillés avant d'effectuer votre injection.


Illustration des pièces

Dispositif de protection jaune (aiguille à l'intérieur)


AVANT L'UTILISATION

Bouton déclencheur gris Date de péremption

Fenêtre Médicament Capuchon orange en place

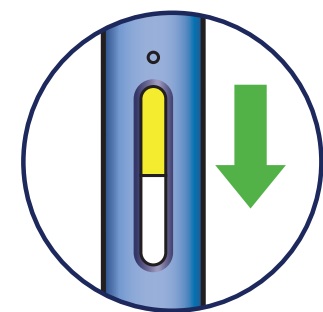


JAUNISSEMENT

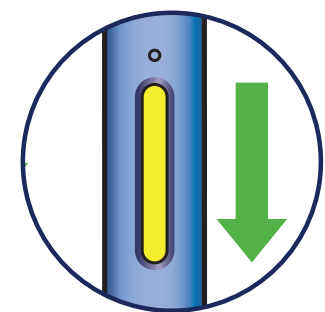

TERMINÉ ✓

La **FENÊTRE** deviendra **jaune** pendant l'injection (injection terminée)

Important:
l'aiguille se trouve à l'intérieur du dispositif de protection jaune

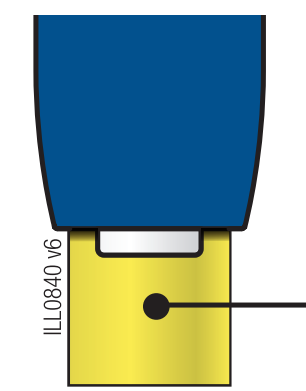

Capuchon orange retiré

Assurez-vous que le **MÉDICAMENT** dans la fenêtre est limpide et incolore à jaunâtre

⚠ N'utilisez PAS l'auto-injecteur si la solution est trouble, a changé de couleur ou contient de gros grumeaux, des flocons ou des particules.

⚠ NE PAS toucher le dispositif de protection jaune (aiguille à l'intérieur).

⚠ NE retirez PAS le capuchon orange de l'auto-injecteur avant d'être prêt à faire l'injection. Effectuez l'injection dans les **5 minutes** suivant le retrait du capuchon orange.

- Si le capuchon orange est retiré pendant plus de 5 minutes, le médicament peut sécher et obstruer l'aiguille.

BESOIN D'AIDE?  Vous pouvez joindre le Programme de soutien aux patients REPÈREpatha^{MD} au **1 888 Repatha (1 888 737-2842)**, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, HNE.



Consultez le site
Repatha.ca

SE PRÉPARER À L'INJECTION | PRÉPARER L'AUTO-INJECTEUR

Préparez l'auto-injecteur en l'amenant naturellement à la température ambiante



Attendez au moins 30 minutes pour que l'auto-injecteur atteigne naturellement la température ambiante

Sortez l'auto-injecteur dont vous avez besoin pour l'injection actuelle

- Rassemblez le matériel nécessaire : tampons d'alcool, tampon d'ouate ou compresses de gaze, pansement adhésif et contenant pour jeter les objets pointus ou tranchants
- ⚠ Conservez l'auto-injecteur et tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants.



Utilisez l'auto-injecteur dans les 5 minutes suivant le retrait du capuchon orange

- ⚠ **NE** retirez **PAS** le capuchon orange de l'auto-injecteur avant d'être prêt à faire l'injection.
- Si vous attendez plus de 5 minutes, le médicament peut sécher et obstruer l'aiguille lors de l'injection.

⚠ **N'**agitez **PAS** l'auto-injecteur.

⚠ **NE PAS** le remettre l'auto-injecteur au réfrigérateur une fois qu'il a atteint la température ambiante.




⚠ Jetez l'auto-injecteur s'il est resté hors du réfrigérateur pendant 30 jours.

⚠ **NE laissez PAS** l'auto-injecteur dans la voiture.

⚠ **N'**exposez **PAS** l'auto-injecteur aux rayons directs du soleil.

⚠ **N'**essayez **PAS** de réchauffer l'auto-injecteur à l'aide d'une source de chaleur comme l'eau chaude ou un four à micro-ondes.

⚠ **NE** congelez **PAS** l'auto-injecteur t **n'**en utilisez **pas** un qui a été congelé.

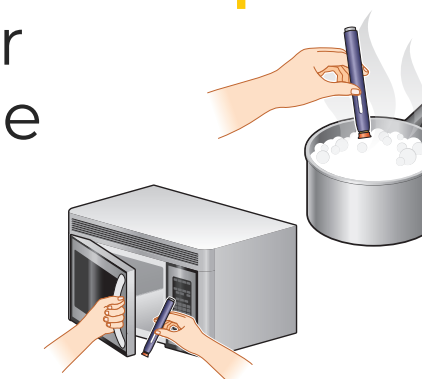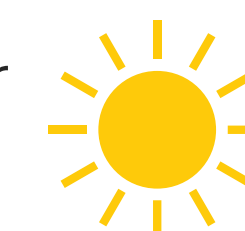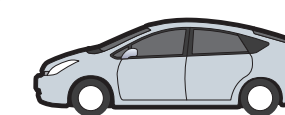


Veuillez consulter les renseignements importants sur l'innocuité à la page 23. Consultez également le feuillet de renseignements complets sur les médicaments à l'intention des patients, qui est fourni avec votre médicament.

SE PRÉPARER À L'INJECTION | SÉLECTIONNER ET NETTOYER LE POINT D'INJECTION

Sélectionnez le point où vous-même ou votre aidant avez l'intention de faire l'injection

- Installez-vous dans un endroit tranquille, calme et bien éclairé, où vous aurez rassemblé le matériel nécessaire. Choisissez un lieu où vous êtes certain de ne pas être interrompu. Sur une surface propre et bien éclairée, placez les articles suivants.
- Sélectionnez un site d'injection parmi les suivants :
 - Le site d'injection peut être votre cuisse, votre abdomen (sauf dans un rayon de 5 cm [2 po] autour du nombril) ou la partie supérieure externe du bras (uniquement si quelqu'un d'autre fait l'injection).
- Lavez-vous les mains avant de sélectionner et de nettoyer le site d'injection.

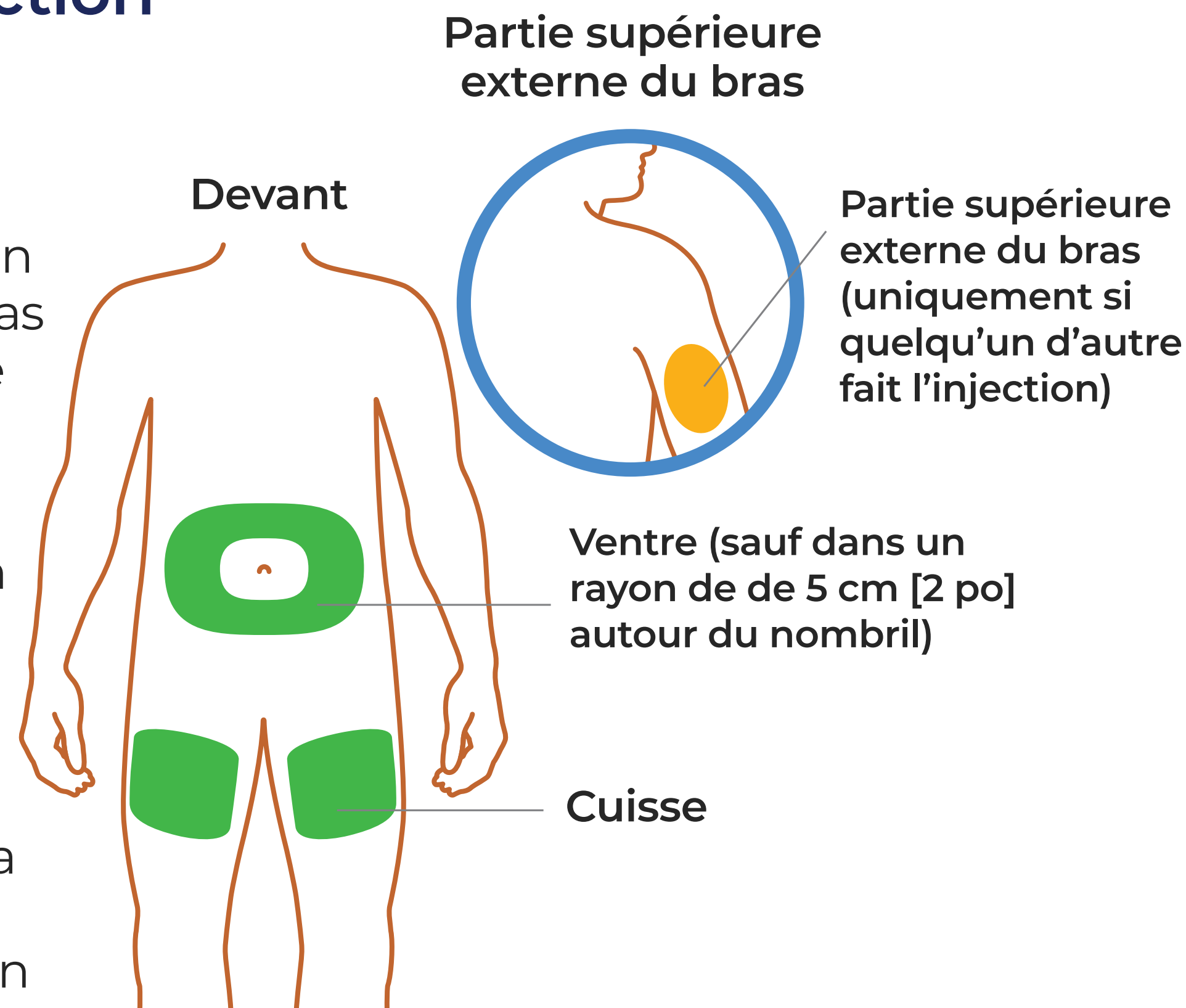

- Nettoyez le point d'injection à l'aide d'un tampon d'alcool et laissez sécher la peau.

⚠ **NE retouchez PAS** au point d'injection avant de faire l'injection.

⚠ **NE faites PAS** l'injection à un endroit où la peau est sensible, rouge, dure ou couverte d'une ecchymose (un bleu).

- Évitez de faire l'injection à un endroit où la peau est gonflée, épaissie, rouge ou écailleuse, ou présente une lésion, une cicatrice ou des vergetures.

Conseils!

- Pincez ou étirez la peau pour obtenir une surface ferme d'environ 2 po (5 cm) de largeur.
- Choisissez un site d'injection qui a une couche de graisse plus épaisse.
- Certaines personnes tiennent un journal ou consignent des notes dans leur téléphone cellulaire pour faire le suivi de leurs injections.


BESOIN D'AIDE? Vous pouvez joindre le Programme de soutien aux patients REPÈREpatha^{MD} au **1 888 Repatha (1 888 737-2842)**, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, HNE.

 **Consultez le site Repatha.ca**

SE PRÉPARER | RETIRER LE CAPUCHON DE L'AUTO-INJECTEUR

Retirez le capuchon orange en tirant dessus en ligne droite seulement une fois que vous êtes prêt à injecter le médicament

Si vous avez des questions, consultez le feuillet de **renseignements sur les médicaments à l'intention des patients** ou joignez le Programme de soutien aux patients REPÈREpatha^{MD}, au **1 888 Repatha (1 888 737-2842)**, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, HNE. **Ou encore, consultez le site Repatha.ca**

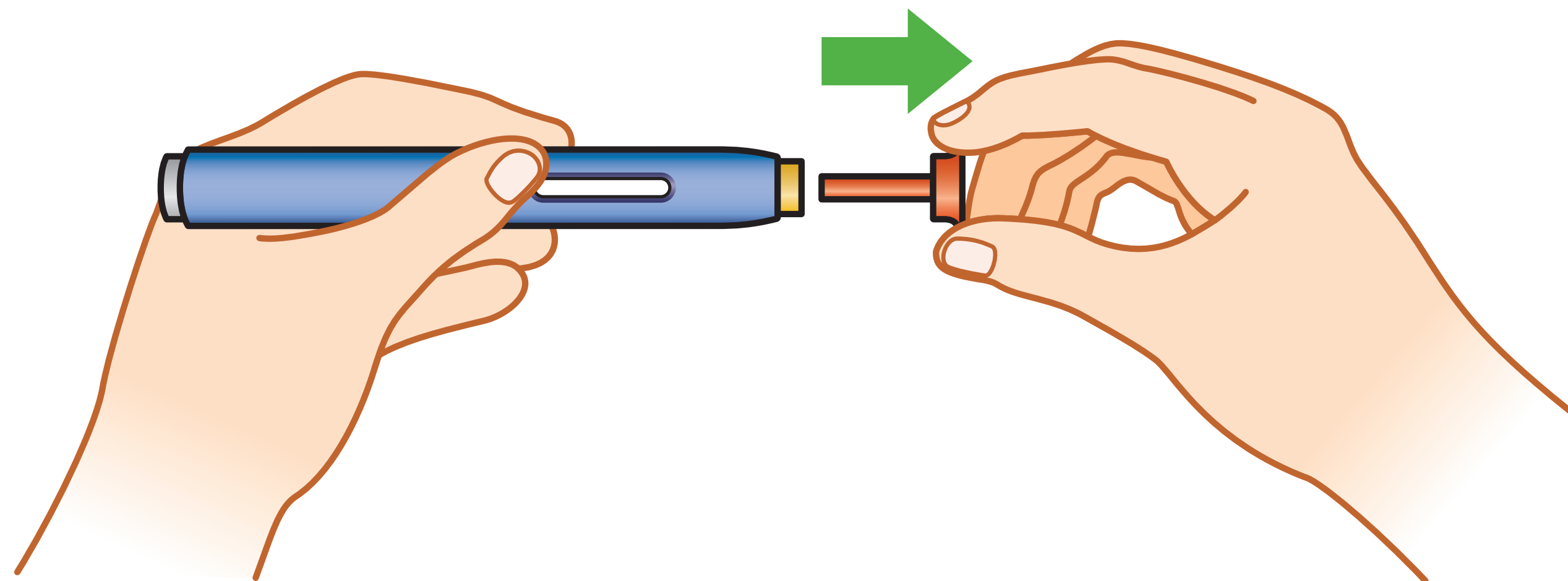


Utilisez l'auto-injecteur dans les 5 minutes suivant le retrait du capuchon orange

- ⚠ **NE** tordez **PAS**, **ne** pliez **pas** et **ne** tortillez **pas** le capuchon orange.
- ⚠ **NE** retirez **PAS** le capuchon orange avant d'être prêt à faire l'injection pour éviter que le médicament ne sèche.
- ⚠ **NE** remettez **PAS** le capuchon orange sur l'auto-injecteur une fois qu'il a été retiré.
- ⚠ **N'**insérez **PAS** le doigt dans le dispositif de protection jaune.

Veuillez consulter les renseignements importants sur l'innocuité à la page 23. Consultez également le feuillet de renseignements complets sur les médicaments à l'intention des patients, qui est fourni avec votre médicament.


CONSEILS | PINCEZ OU ÉTIREZ LA PEAU POUR OBTENIR UNE SURFACE D'ENVIRON 5 CM (2 PO) DE LARGEUR

MÉTHODE DE L'ÉTIREMENT 5 cm (2 po)

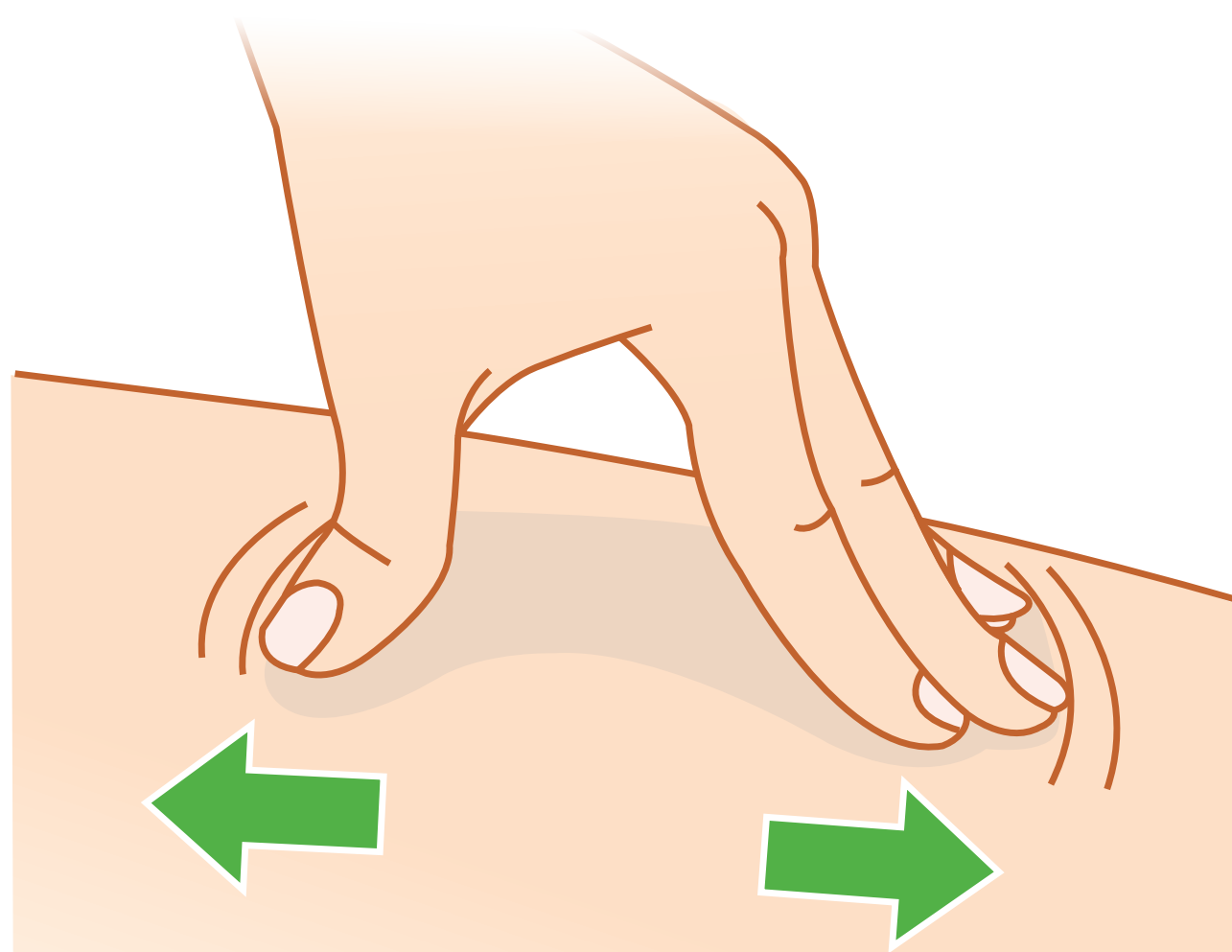

Étirez fermement la peau en écartant le pouce et les doigts dans des directions opposées pour créer un espace d'environ **5 centimètres (2 pouces) de large**.

MÉTHODE DU PINCEMENT 5 cm (2 po)

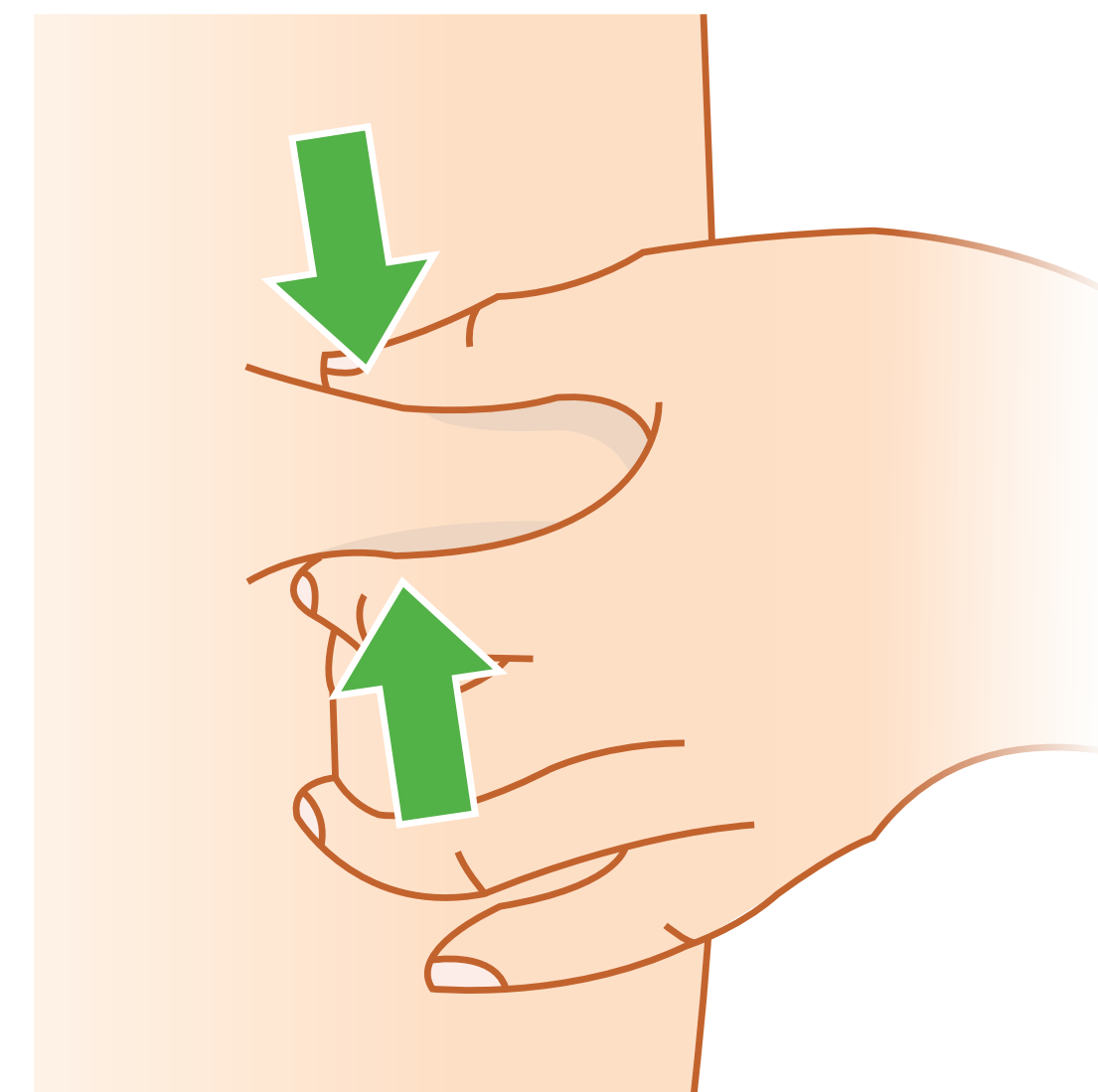

Pincez fermement la peau entre le pouce et les doigts pour créer un espace d'environ **5 centimètres (2 pouces) de large**.

 Il est important de maintenir la peau étirée ou pincée tout au long de l'injection.

BESOIN D'AIDE?




Vous pouvez joindre le Programme de soutien aux patients REPÈREpatha^{MD} au **1 888 Repatha (1 888 737-2842)**, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, HNE.




Consultez le site
Repatha.ca


INJECTER | PLACER LE DISPOSITIF DE PROTECTION SUR LA PEAU À UN ANGLE DE 90 DEGRÉS

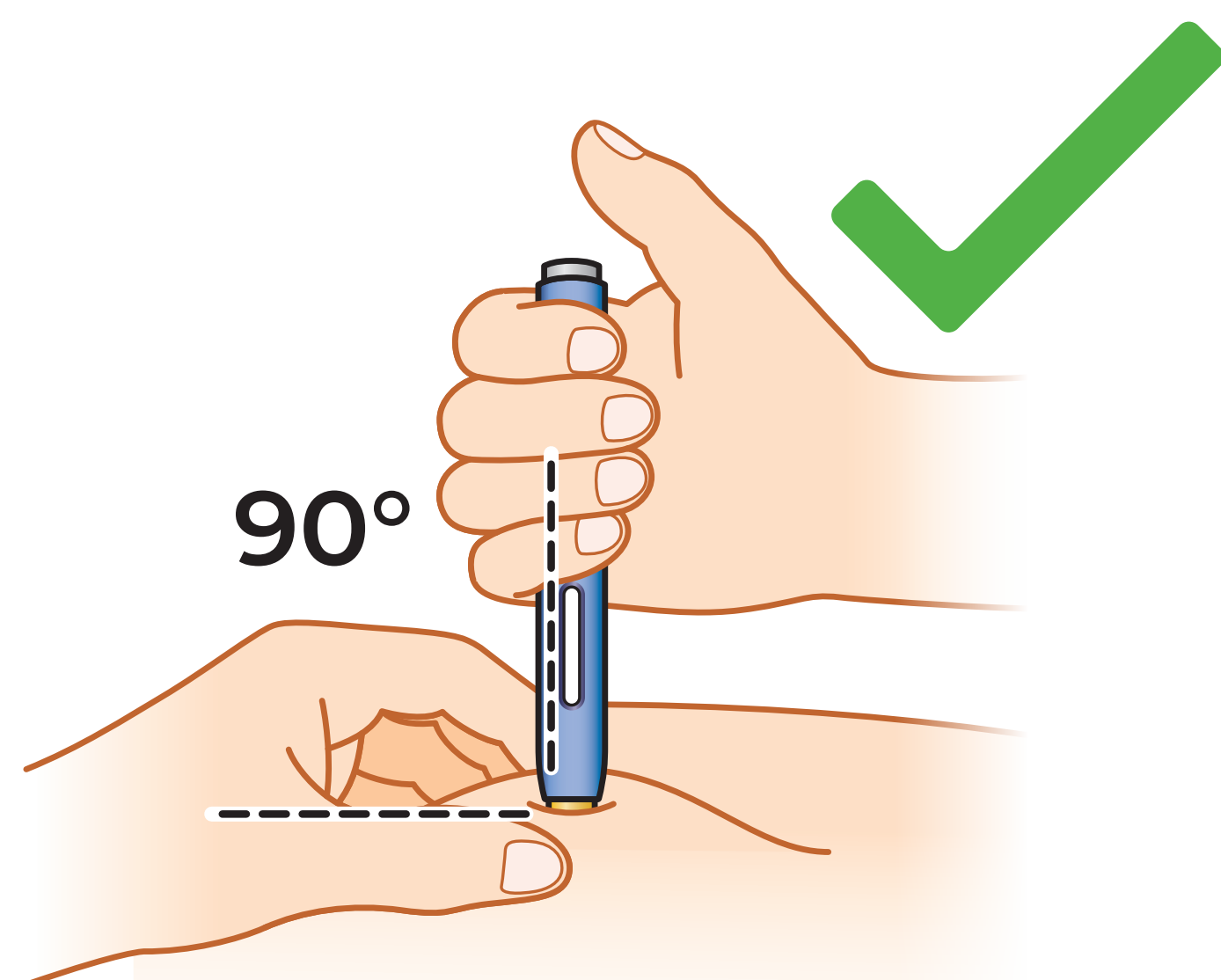

PLACEZ l'auto-injecteur droit sur la peau à un angle de 90 degrés.

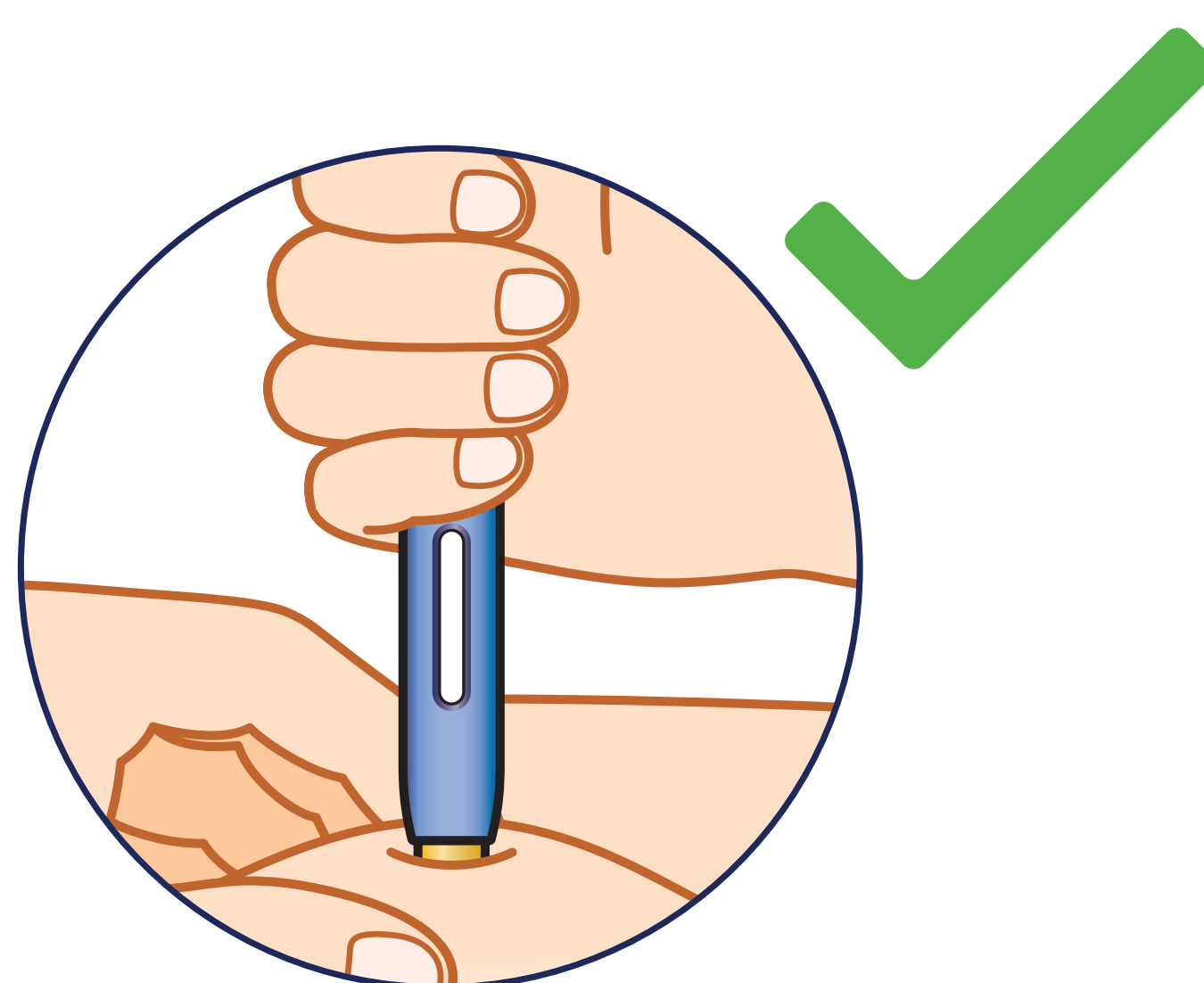

Assurez-vous que vous pouvez entièrement voir la fenêtre du médicament et que vos doigts ne couvrent pas la fenêtre.

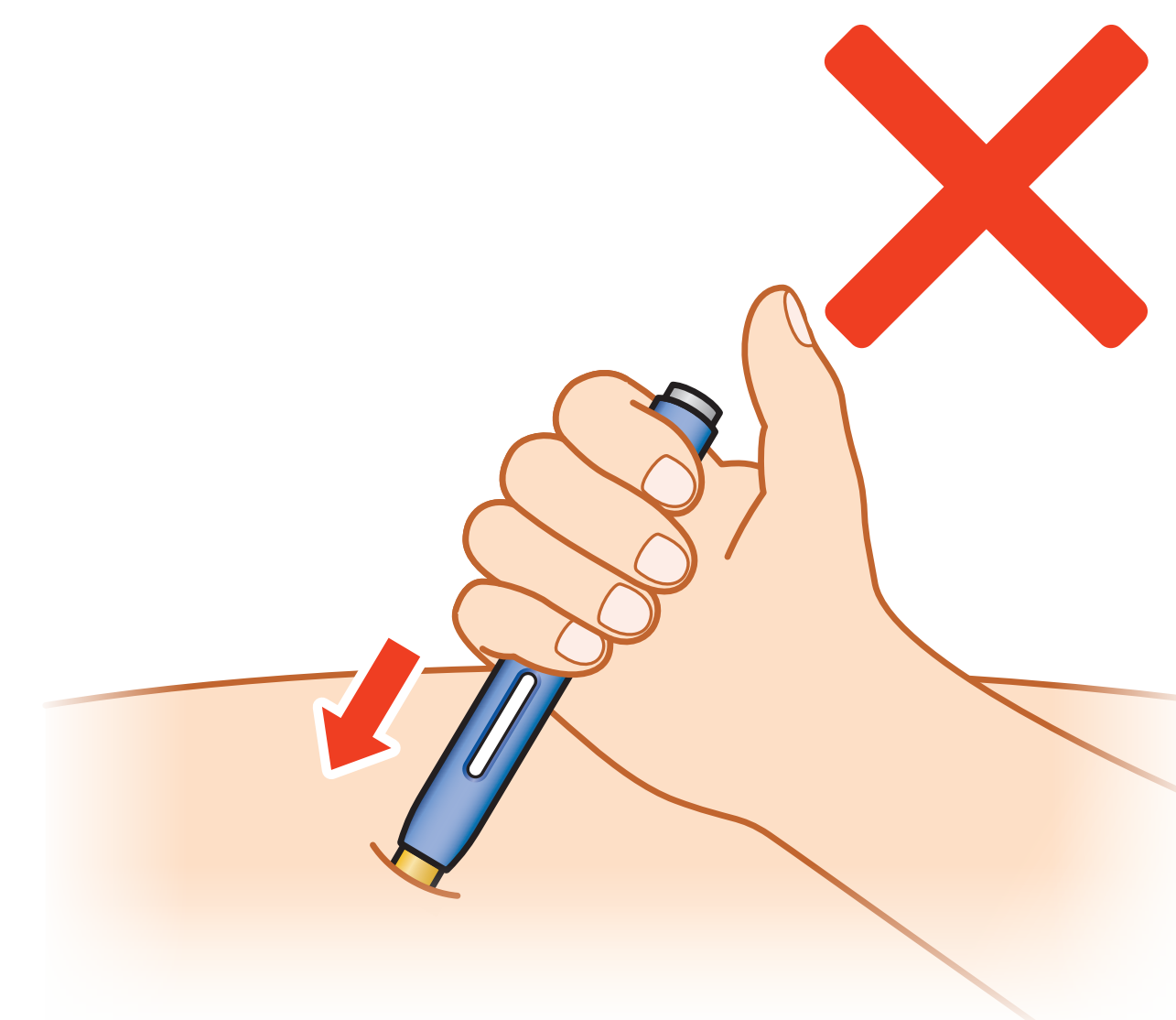


⚠ **N'**appliquez **PAS** l'auto-injecteur sur la peau en angle. Vous pourriez ne pas être totalement en contact avec la peau, ce qui peut empêcher l'auto-injecteur de fonctionner correctement.

- ⚠ **NE** touchez **PAS** au bouton déclencheur gris pour l'instant.
- ⚠ **NE changez PAS** de position après avoir commencé l'injection.

Veuillez consulter les renseignements importants sur l'innocuité à la page 23. Consultez également le feuillet de renseignements complets sur les médicaments à l'intention des patients, qui est fourni avec votre médicament.

INJECTER | POUSSER L'AUTO-INJECTEUR FERMEMENT SUR LA PEAU ET LE MAINTENIR EN PLACE

1. Pour commencer l'injection, **PRESSEZ** fermement l'auto-injecteur sur la peau jusqu'à ce que le dispositif de protection jaune ne soit plus visible

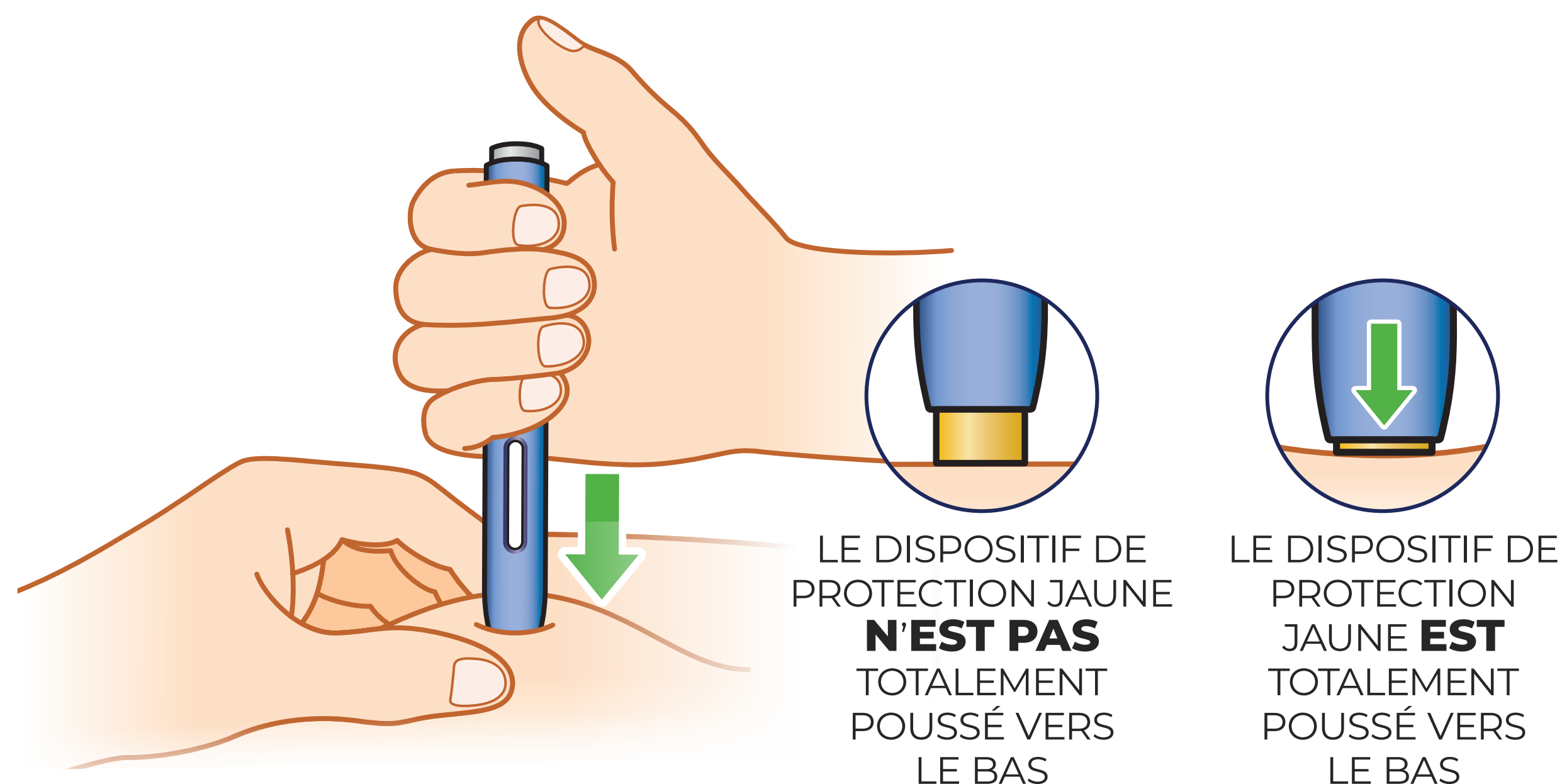

POUSSEZ tout droit vers le bas et **MAINTENEZ-LE**

- Poussez l'auto-injecteur sur la peau et appuyez sur le dispositif de protection.
- Assurez-vous que le dispositif de protection jaune est complètement enfoncé avant de passer à l'étape suivante.
- **MAINTENEZ-LE EN PLACE** jusqu'à ce que l'injection soit terminée.

⚠ Le **BOUTON DÉCLENCHEUR GRIS** ne fonctionne qu'une fois que le dispositif de protection jaune a été totalement poussé vers le bas.


⚠ Continuez à pousser vers le bas tout au long de l'injection.

BESOIN D'AIDE?  Vous pouvez joindre le Programme de soutien aux patients REPÈREpatha^{MD} au **1 888 Repatha (1 888 737-2842)**, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, HNE.

 **Consultez le site Repatha.ca**

INJECTER | APPUYER SUR LE BOUTON DÉCLENCHEUR GRIS POUR COMMENCER L'INJECTION

2. Ensuite, appuyez sur le bouton déclencheur gris pour déclencher l'écoulement du médicament

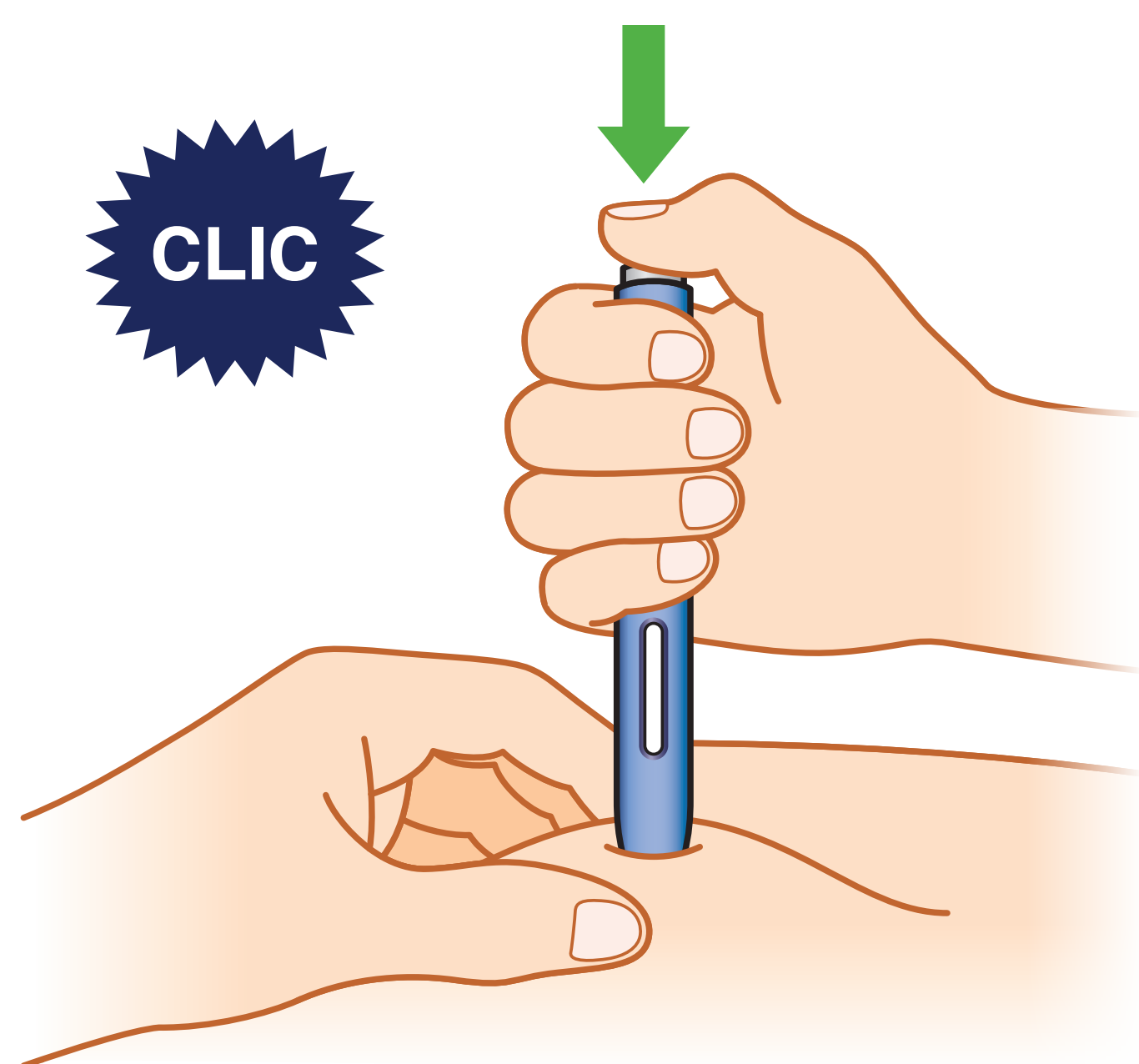

APPUYEZ sur le bouton déclencheur gris jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

- **CONTINUEZ À MAINTENIR** l'auto-injecteur en place avec la même pression tout au long de l'injection.
- **LE BOUTON DÉCLENCHEUR GRIS** ne fonctionne qu'une fois que le dispositif de protection jaune a été totalement poussé vers le bas.


⚠ Si vous n'entendez pas de clic après avoir appuyé sur le bouton déclencheur gris et que la fenêtre est toujours entièrement dégagée, assurez-vous que le dispositif de protection est totalement poussé vers le bas. Ensuite, appuyez de nouveau sur le bouton déclencheur gris.

⚠ Ces étapes doivent être effectuées dans cet ordre pour que l'injection soit réussie.

[Veuillez consulter les renseignements importants sur l'innocuité à la page 23. Consultez également le feuillet de renseignements complets sur les médicaments à l'intention des patients, qui est fourni avec votre médicament.](#)

INJECTER | REGARDER ET CONFIRMER QUE LA FENÊTRE DU MÉDICAMENT DEVIENT JAUNE

3. Pour finir, regardez et confirmez que la fenêtre du médicament devient **jaune** ce qui indiquera que l'injection a été effectuée avec succès

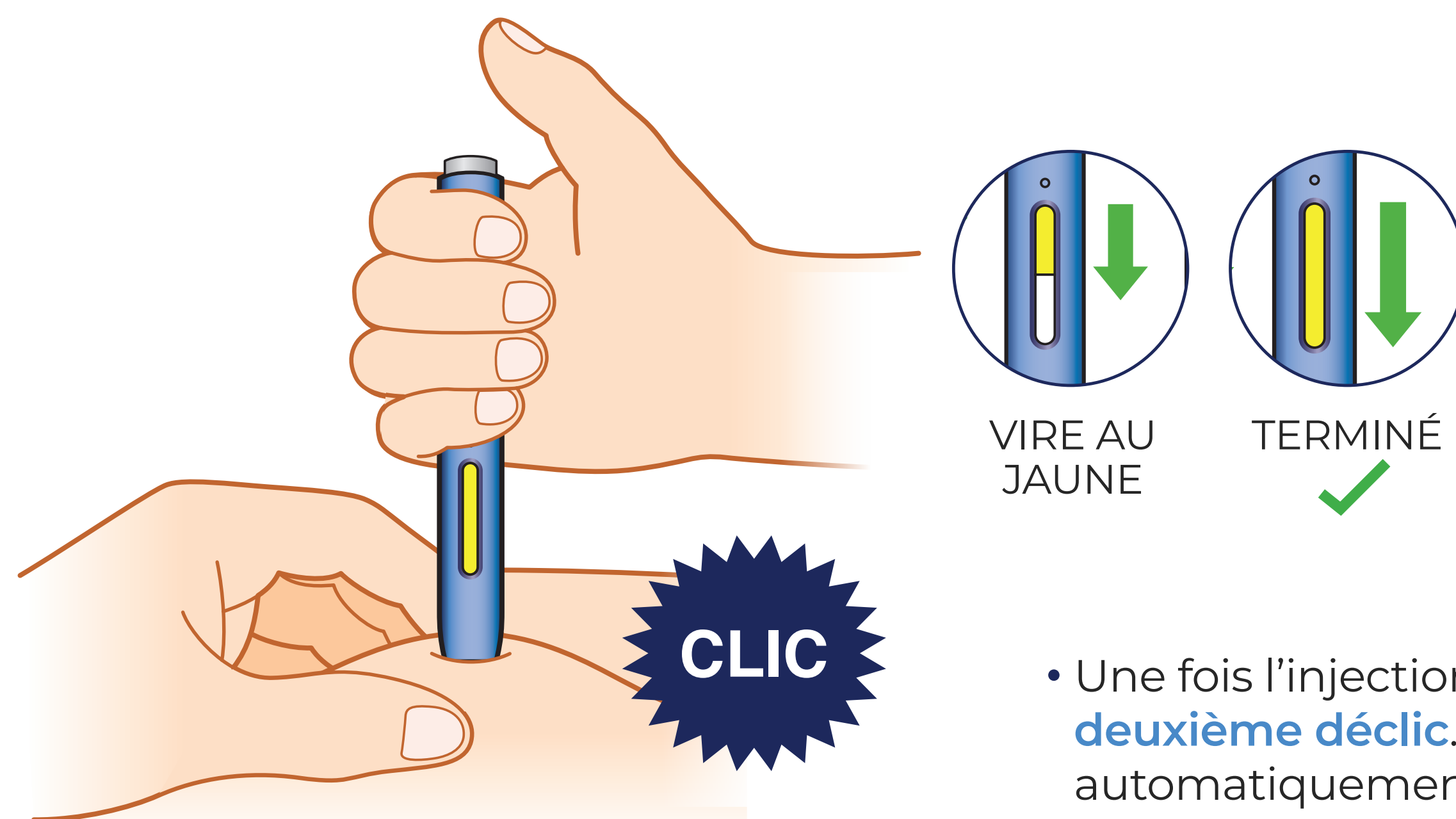

REGARDER ET CONFIRMER

que la fenêtre est **entièrement jaune**

- Maintenez l'auto-injecteur sur votre peau jusqu'à ce que la fenêtre du médicament devienne entièrement **jaune** pour vous assurer que le médicament a été entièrement injecté.
- Vous pouvez soulever votre pouce.
- L'injection peut prendre jusqu'à **15 secondes**.
- Lorsque la fenêtre devient entièrement **jaune**, cela signifie que c'est TERMINÉ!
- Une fois l'injection terminée, la fenêtre passe du transparent au **jaune**. Vous pourriez entendre un **deuxième clic**. (Remarque : après avoir retiré l'auto-injecteur de votre peau, l'aiguille sera automatiquement recouverte.)
- Si vous n'avez pas entendu de **deuxième clic** après avoir poussé l'auto-injecteur sur votre peau pendant environ 15 secondes, la fenêtre **jaune** confirme toujours que l'injection est effectuée.

★ FÉLICITATIONS, VOUS AVEZ TERMINÉ L'ÉTUDE RELATIVE AU PROCESSUS D'INJECTION!


Continuez à vous exercer à **POUSSER, APPUYER, REGARDER ET CONFIRMER** pour renforcer la confiance. Commencez à intégrer ces étapes à votre routine de traitement par Repatha^{MD} et assurez-vous de communiquer avec votre équipe de soins si vous avez des questions ou des préoccupations.

BESOIN D'AIDE? Vous pouvez joindre le Programme de soutien aux patients REPÈRERepatha^{MD} au **1 888 Repatha (1 888 737-2842)**, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, HNE.

 **Consultez le site Repatha.ca**

ENTREPOSAGE ET MISE AU REBUT

Directives de réfrigération :

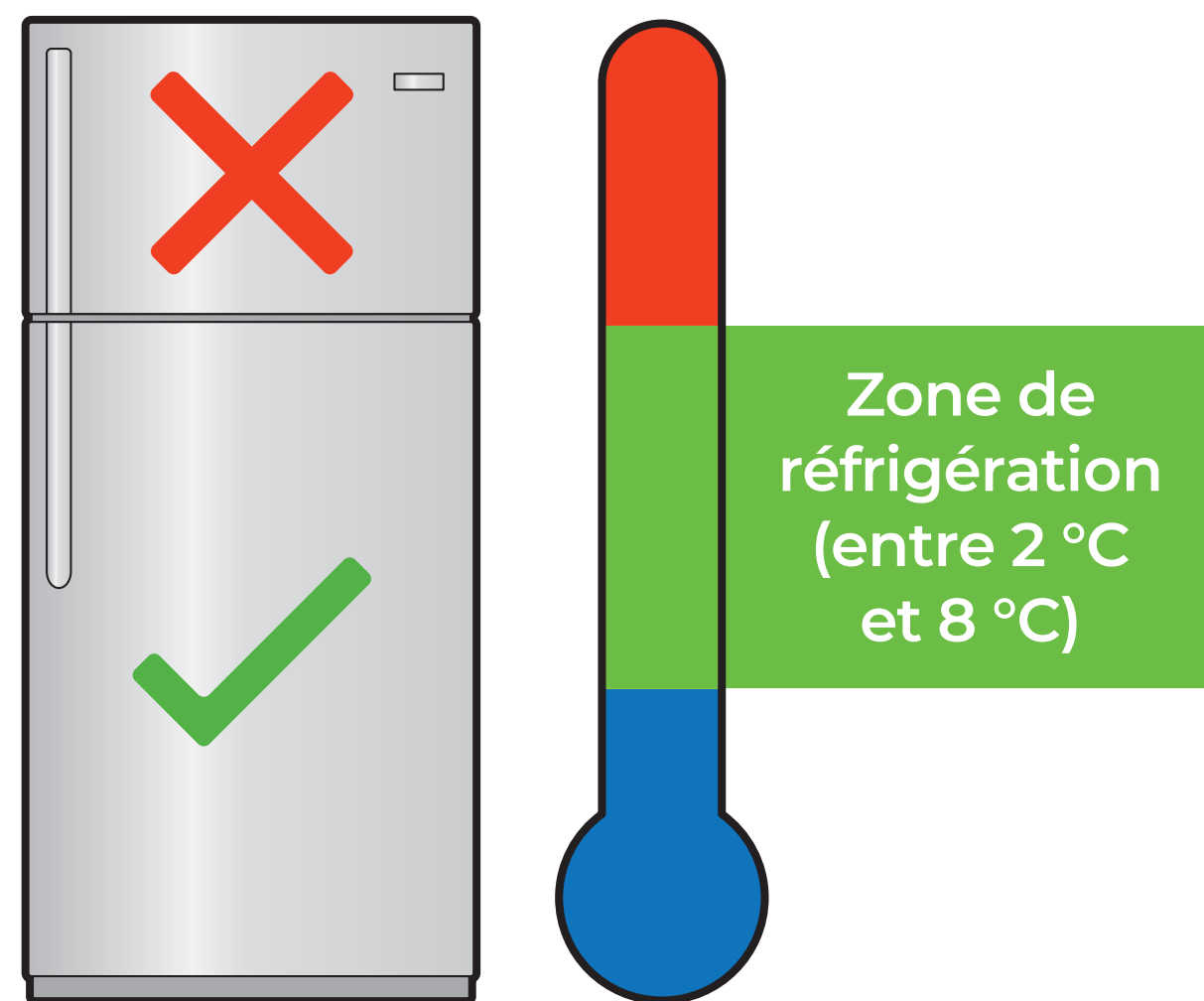

⚠ **NE PAS** congeler l'auto-injecteur.

- Lorsque vous recevez l'auto-injecteur, assurez-vous de le placer directement au réfrigérateur.
- Conservez-le au réfrigérateur (entre 2 °C et 8 °C) jusqu'au moment de l'utilisation.
- Conservez-le dans son emballage d'origine afin de le protéger de la lumière et des dommages.
- Ne retirez l'auto-injecteur que lorsque vous prévoyez de l'utiliser.


Directives de mise au rebut :

- Placez l'auto-injecteur utilisé ainsi que le capuchon orange dans un contenant pour objets pointus et tranchants immédiatement après utilisation.

⚠ **NE** jetez **PAS** l'auto-injecteur ou le capuchon orange dans vos ordures ménagères.

⚠ **NE** remettez **PAS** le capuchon orange en place.

⚠ **NE** touchez **PAS** le dispositif de protection jaune.

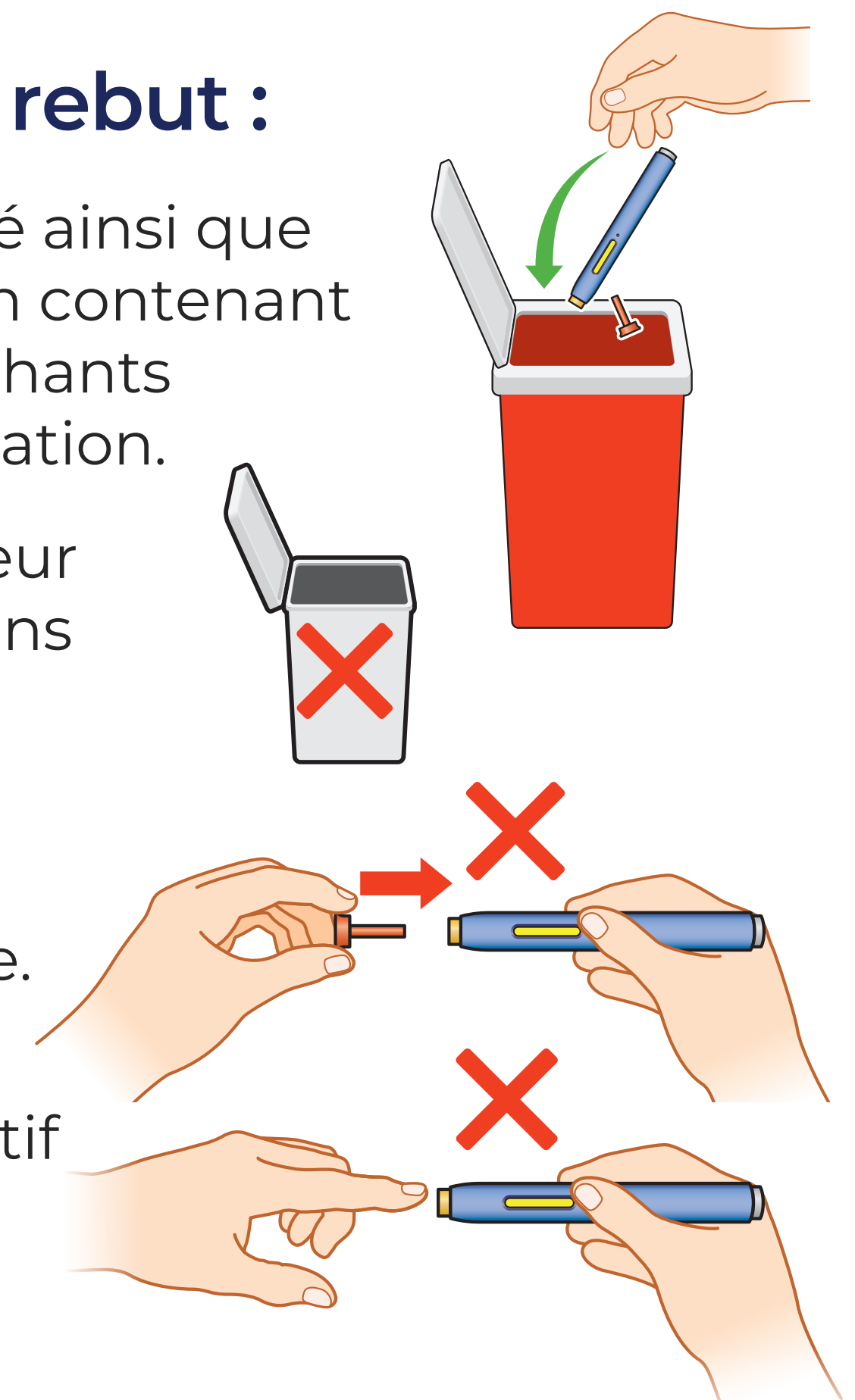

Veuillez consulter les renseignements importants sur l'innocuité à la page 23. Consultez également le feuillet de renseignements complets sur les médicaments à l'intention des patients, qui est fourni avec votre médicament.

FÉLICITATIONS,

vous avez terminé l'étude relative au processus d'injection!

Continuez à vous exercer à **POUSSER, APPUYER, REGARDER ET CONFIRMER** pour renforcer la confiance. Commencez à intégrer ces étapes à votre routine de traitement par Repatha^{MD} et assurez-vous de communiquer avec votre équipe de soins si vous avez des questions ou des préoccupations.



BESOIN D'AIDE?



Vous pouvez joindre le Programme de soutien aux patients REPÈRERepatha^{MD} au **1 888 Repatha (1 888 737-2842)**, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, HNE.



Consultez le site
Repatha.ca

RESOURCES

Dans cette section, nous discuterons des diverses ressources utiles qui vous sont offertes et qui sont disponibles en un clic ou grâce à un simple appel téléphonique.



Veuillez consulter les renseignements importants sur l'innocuité à la page 23. Consultez également le feuillet de renseignements complets sur les médicaments à l'intention des patients, qui est fourni avec votre médicament.

GETTING
STARTED

INJECT

RESOURCES

FAQ

TRAVEL
GUIDANCE

IMPORTANT
SAFETY INFORMATION

LE SOUTIEN DESTINÉ AUX PATIENTS CONCERNANT L'UTILISATION DE L'AUTO-INJECTEUR SURECLICK EST DISPONIBLE

Soutien en direct



Le programme de soutien destiné aux patients, RepathaREADY^{MD}, est prêt à vous aider.

Composez le 1 888 Repatha (1 888 737-2842), du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, HNE.

Vidéo de démonstration sur l'utilisation de l'auto-injecteur Repatha^{MD} SureClick



Placez l'appareil photo de votre téléphone intelligent au-dessus du code QR.

La vidéo de démonstration sur l'utilisation de l'auto-injecteur Repatha^{MD} SureClick peut également être visionnée sur le site **Repatha.ca**

Ressources supplémentaires



Consultez le site Repatha.ca

Pour y accéder, vous aurez besoin du DIN de l'auto-injecteur SureClick : 02446057.

BESOIN D'AIDE?



Vous pouvez joindre le Programme de soutien aux patients REPÈRERepatha^{MD} au 1 888 Repatha (1 888 737-2842), du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, HNE.



Consultez le site Repatha.ca

FAQ

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE ET ENTREPOSAGE :

Quel est le meilleur moyen de conserver mon auto-injecteur SureClick? Conservez l'auto-injecteur au réfrigérateur (à une température comprise entre 2 °C et 8 °C) dans son emballage original.

⚠ NE congelez **PAS**.

J'ai laissé mon auto-injecteur hors du réfrigérateur. Cela pose-t-il un problème? Votre auto-injecteur peut être conservé à température ambiante (jusqu'à 25 °C) jusqu'à **30 jours** dans son emballage original. Ne le replacez plus au réfrigérateur une fois qu'il en est sorti et qu'il atteint la température ambiante.

Température ambiante :
Jusqu'à 25 °C
Jusqu'à 30 jours




DIRECTIVES CONCERNANT LA TEMPÉRATURE AMBIANTE :

Dois-je vraiment attendre 30 minutes pour que l'auto-injecteur atteigne la température ambiante avant de procéder à l'injection?

Oui. Cela est non seulement nécessaire pour l'administration de la dose complète, mais permet également de minimiser la sensation de gêne. l'injection du Repatha^{MD} peut durer plus longtemps si le produit n'a pas atteint la température ambiante. Ne chauffez pas l'auto-injecteur. Laissez-le atteindre la température ambiante de façon naturelle.

Pourquoi dois-je utiliser l'auto-injecteur dans les 5 minutes suivant le retrait du capuchon? Si vous attendez plus de 5 minutes, le médicament peut sécher et obstruer l'aiguille, ce qui entraîne un échec de l'injection.

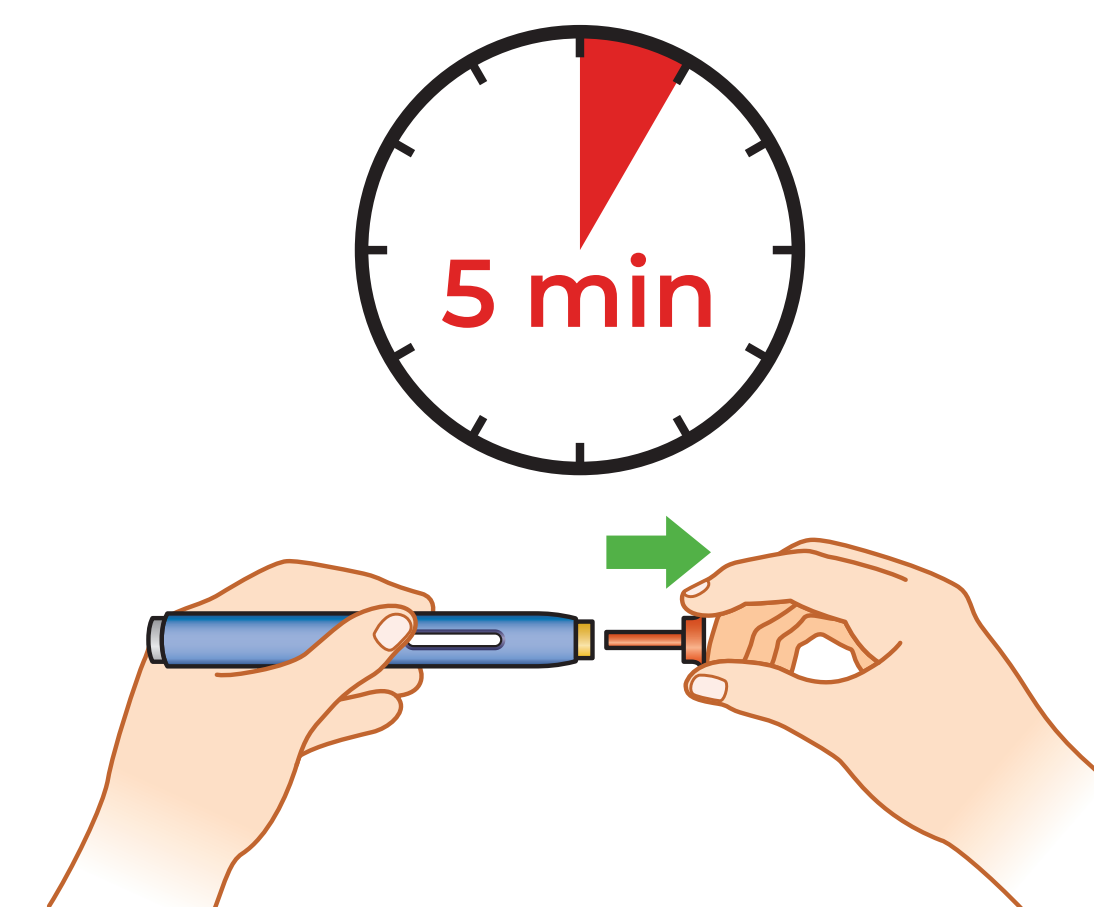

[Veuillez consulter les renseignements importants sur l'innocuité à la page 23. Consultez également le feuillet de renseignements complets sur les médicaments à l'intention des patients, qui est fourni avec votre médicament.](#)

GETTING
STARTED

INJECT

RESOURCES

FAQ

TRAVEL
GUIDANCE

IMPORTANT
SAFETY INFORMATION

FAQ

QUESTIONS RELATIVES AU POINT D'INJECTION :

Pourquoi dois-je étirer ou pincer la peau? Vous devez **ÉTIRER** ou **PINCER** la peau pour créer une zone de 2 pouces (5 cm) de largeur **afin de maintenir une surface ferme** tout au long de l'injection.

Puis-je déplacer l'auto-injecteur sur ma peau? Oui, vous pouvez le déplacer **AVANT** d'**APPUYER** sur le bouton déclencheur gris.

⚠ NE PAS déplacer l'auto-injecteur **APRÈS** avoir **APPUYÉ** sur le bouton **DÉCLENCHEUR** gris, car vous pourriez ne pas recevoir la dose complète du médicament.


QUESTIONS RELATIVES AU BOUTON DÉCLENCHEUR :

Dois-je enfoncer et relâcher le bouton déclencheur gris ou dois-je appuyer sur le bouton déclencheur gris et le maintenir enfoncé pendant l'injection? Si vous avez besoin de soulever votre pouce, cela n'est pas un problème. Évitez de soulever l'auto-injecteur jusqu'à ce que l'injection soit terminée.

Que se passera-t-il si j'appuie sur le bouton déclencheur gris sans être prêt à procéder à l'injection?

L'auto-injecteur ne fonctionnera pas et ne laissera pas passer le médicament, à moins que le dispositif de protection jaune ne soit complètement enfoncé dans la peau avant l'activation du bouton déclencheur.

Que se passe-t-il si je suis incapable d'appuyer sur le bouton déclencheur? Vérifiez que le dispositif de protection jaune n'est plus visible. Si le dispositif de protection jaune n'est pas complètement enfoncé, le bouton déclencheur gris pourrait ne pas fonctionner. Vous entendrez un **DÉCLIC** lorsque le bouton déclencheur gris aura été activé correctement.

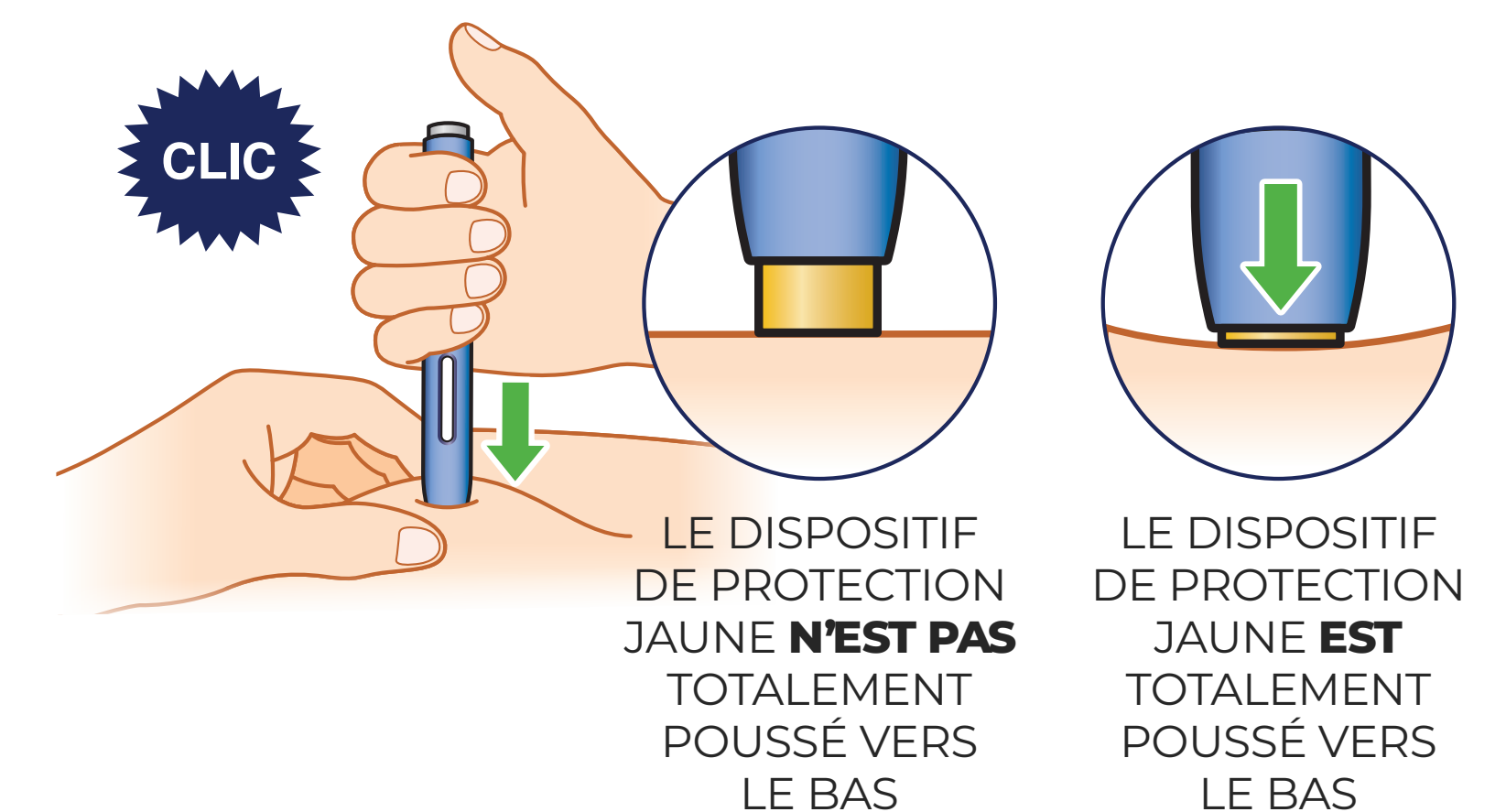

BESOIN D'AIDE?



Vous pouvez joindre le Programme de soutien aux patients REPÈRERepatha^{MD} au **1 888 Repatha (1 888 737-2842)**, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, HNE.



Consultez le site
Repatha.ca

DIRECTIVES EN CAS DE VOYAGES

CONSEILS GÉNÉRAUX À APPLIQUER LORS DES VOYAGES

Oui, vous pouvez effectuer des voyages. Vous ne devez manquer aucun de vos traitements. En fait, il est important que vous ne manquiez pas votre injection lorsque vous voyagez.

- Gardez toujours votre médicament avec vous pour vous assurer qu'il est conservé dans la zone de température sécuritaire et qu'il ne se brise pas.

⚠ **NE** conservez **PAS** l'auto-injecteur dans un endroit extrêmement chaud ou froid. Par exemple, évitez de le ranger dans la boîte à gants ou dans le coffre de votre véhicule.

⚠ **N'agitez PAS** l'auto-injecteur.

⚠ **N'utilisez PAS** l'auto-injecteur s'il est tombé sur une surface dure. Une partie de l'auto-injecteur peut s'être brisée même si vous ne voyez pas lde fêlure. Utilisez un nouvel auto-injecteur et composez le **1-888-Repatha (1-888-737-2842)**.

COURTS DÉPLACEMENTS

- L'auto-injecteur peut être conservé à température ambiante (jusqu'à 25 °C) dans son emballage original jusqu'à 30 jours sans réfrigération.

⚠ N'oubliez pas qu'une fois que l'auto-injecteur a atteint la température ambiante, vous ne devez pas le remettre au réfrigérateur.



Important :

Conservez l'auto-injecteur dans son emballage original.

DÉPLACEMENTS PLUS LONGS

- Communiquez avec votre pharmacien ou médecin pour discuter à propos d'autres options telles que le remplissage de votre ordonnance à la destination souhaitée.



[Veuillez consulter les renseignements importants sur l'innocuité à la page 23. Consultez également le feuillet de renseignements complets sur les médicaments à l'intention des patients, qui est fourni avec votre médicament.](#)

GETTING
STARTED

INJECT

RESOURCES

FAQ

TRAVEL
GUIDANCE

IMPORTANT
SAFETY INFORMATION

DIRECTIVES EN CAS DE VOYAGES


DIRECTIVES POUR LES DÉPLACEMENTS EN VOITURE ET PAR AVION

Voyages en voiture :

⚠ **NE** laissez **PAS** l'auto-injecteur dans votre voiture s'il celle-ci est exposée à une chaleur ou à un froid extrême, ou aux rayons du soleil.


⚠ **NE** conservez **PAS** l'auto-injecteur dans la boîte à gants ou dans le coffre de votre véhicule.

- Une fois que l'auto-injecteur a atteint la température ambiante, ne le remettez pas au réfrigérateur.

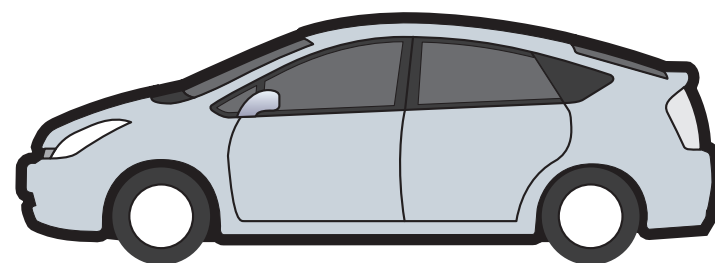

Voyages par avion :

Avant de voyager :

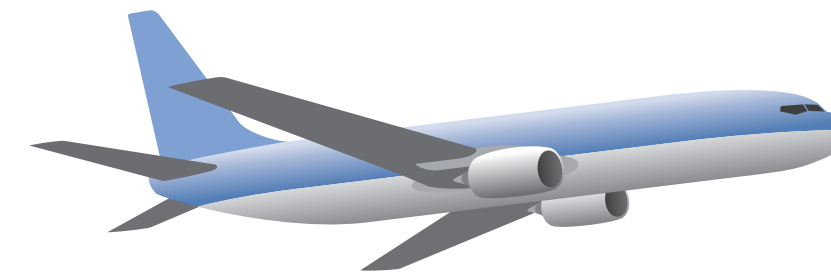

- Communiquez avec votre compagnie aérienne au sujet de la politique en matière de bagages à main en ce qui concerne les aiguilles, les seringues ou les dispositifs d'injection. Le règlement en matière de sécurité peut changer.
- Faites des recherches sur les exigences relatives aux dispositifs d'injection des autres pays que vous pourriez visiter.
- Apportez une copie de votre ordonnance ou une note de votre médecin à présenter au personnel chargé de la sécurité de l'aéroport.

Pour la sécurité de l'aéroport :

- Informez les agents de sécurité que vous transportez un contenant pour objets pointus et tranchants.
- Pensez à demander une « vérification manuelle » de votre trousse de médicaments afin d'éviter tout retard.
- Soyez prêt à présenter, manipuler et réemballer vos propres médicaments et fournitures afin d'éviter leur contamination ou des dommages.



Pour obtenir des renseignements sur les voyages par avion avec Repatha^{MD}, veuillez consulter : L'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) www.catsa-acsta.gc.ca/

- Si vous pouvez transporter Repatha^{MD}, assurez-vous que l'**étiquette d'ordonnance (Rx)** est jointe.
- Si vous avez besoin d'aide supplémentaire ou si vous avez des préoccupations concernant la sécurité de l'aéroport, veuillez composer le **1 888 294-2202**.
- Pour les vols en provenance de pays situés **hors du Canada**, communiquez avec votre compagnie aérienne ou votre agent de voyages pour prendre connaissance des restrictions.

BESOIN D'AIDE?



Vous pouvez joindre le Programme de soutien aux patients REPÈRE Repatha^{MD} au **1 888 Repatha (1 888 737-2842)**, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, HNE.



Consultez le site
Repatha.ca

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR REPATHA^{MD}

N'utilisez pas Repatha^{MD} si vous avez déjà eu une réaction allergique à Repatha^{MD} ou à l'un de ses ingrédients.

Consultez votre professionnel de la santé si vous souffrez d'allergies ou si vous êtes allergique ou sensible au caoutchouc ou au latex, car le capuchon de l'aiguille de l'auto-injecteur SureClick contient du caoutchouc naturel sec.

Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre Repatha^{MD}, afin réduire le risque d'effets secondaires et d'assurer l'utilisation adéquate du médicament. Discutez de votre état ou de tout problème de santé que vous pourriez avoir.

Si vous prenez Repatha^{MD} en association avec une statine et d'autres médicaments servant à réduire le taux de cholestérol, veuillez lire la notice de ces médicaments.

Enfants et adolescents

L'utilisation de Repatha^{MD} a été étudiée chez les enfants âgés de 10 ans et plus qui ont été traités pour une hypercholestérolémie familiale hétérozygote ou homozygote.

L'utilisation de Repatha^{MD} n'a pas été étudiée chez les enfants de moins de 10 ans ni chez les enfants atteints d'autres types d'hypercholestérolémie.

Repatha^{MD} en association avec d'autres médicaments

Mentionnez à votre professionnel de la santé tous les produits de santé que vous ou votre enfant prenez, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les produits de médecine douce.

Grossesse et allaitement

Repatha^{MD} n'a pas été testé chez les femmes enceintes. On ignore si Repatha^{MD} aura des effets sur votre fœtus. Si vous essayez de

tomber enceinte ou si vous tombez enceinte pendant que vous prenez Repatha^{MD} :

- Informez votre médecin.
- Si vous prenez également une statine en association avec Repatha^{MD}, cessez de prendre Repatha^{MD} et lisez la notice de la statine que vous prenez en association avec Repatha^{MD}.

On ignore si Repatha^{MD} peut s'infiltrer dans le lait maternel. Il est important d'informer votre médecin si vous allaitez ou prévoyez de le faire. Votre médecin vous aidera alors à décider, soit d'arrêter l'allaitement soit de cesser de prendre Repatha^{MD}, compte tenu des bienfaits de l'allaitement pour le bébé et des bienfaits de Repatha^{MD} pour la mère.

Veuillez consulter les renseignements importants sur l'innocuité à la page 23. Consultez également le feuillet de renseignements complets sur les médicaments à l'intention des patients, qui est fourni avec votre médicament.

GETTING
STARTED

INJECT

RESOURCES

FAQ

TRAVEL
GUIDANCE

IMPORTANT
SAFETY INFORMATION

QU'EST-CE QUE REPATHA^{MD} ET À QUOI SERT-IL?

Repatha^{MD} est un médicament qui sert à réduire le taux de cholestérol.

Pourquoi m'a-t-on prescrit Repatha^{MD}?

Repatha^{MD} est utilisé :

- en association avec un régime alimentaire et avec le traitement habituel, y compris les médicaments servant à réduire le taux de cholestérol appelés statines, pour réduire le risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et de certaines interventions cardiaques (afin de rétablir la circulation sanguine vers le cœur) grâce à une réduction supplémentaire du taux de

cholestérol des lipoprotéines de basse densité (LDL) chez les patients adultes atteints d'une maladie cardiovasculaire.

- en association avec un régime alimentaire, seul ou en association avec d'autres traitements chez les adultes atteints d'hyperlipidémie primaire (taux élevé de cholestérol LDL dans le sang) afin de réduire le taux de cholestérol LDL.
- en association avec un régime alimentaire et d'autres traitements afin de réduire le taux de cholestérol LDL chez les personnes âgées de 10 ans et plus qui ont besoin d'une réduction supplémentaire du taux élevé de

cholestérol LDL dans leur sang en raison d'un trouble héréditaire (hypercholestérolémie familiale hétérozygote [HFHe]).

- en association avec un régime alimentaire et d'autres traitements afin de réduire le taux de cholestérol LDL chez les personnes âgées de 10 ans et plus qui ont besoin d'une réduction supplémentaire du taux élevé de cholestérol LDL dans leur sang en raison d'un trouble héréditaire (hypercholestérolémie familiale homozygote [HFHo]).

BESOIN D'AIDE?



Vous pouvez joindre le Programme de soutien aux patients REPÈRE^{MD} Repatha^{MD} au **1 888 Repatha (1 888 737-2842)**, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, HNE.



Consultez le site
Repatha.ca



Le programme de soutien destiné aux patients, RepathaREADY^{MD}, est prêt à vous aider.

Composez le 1-888-Repatha (1-888-737-2842), du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h HNE.

Rendez-vous sur le site Repatha.ca (auto-injecteur SureClick DIN : 02446057) ou numérisez le code QR. the QR code.



© Amgen Canada Inc., 2024. Tous droits réservés.
Repatha^{MD}, REPÈRERepatha^{MD} et SureClick^{MD} sont des marques déposées d'Amgen Inc., utilisées avec autorisation.
AMGEN ENTRUSTTM est une marque de commerce d'Amgen Inc.



CAN-145-1123-80008-24F